
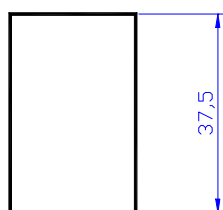


DIMENSIONES

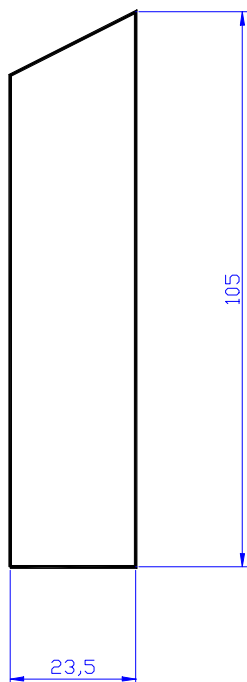

Inge.ray S.R.L.

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

*Equipo de exámen radiológico 300mA / 120kV - 1 puesto
500mA / 125Kvp - 1 ó 2 puestos*

DATOS TÉCNICOS

| SALIDA | 300mA @ 120 Kvp | 500mA @ 125Kvp |
|----------------------------|--|--|
| VOLTAJE DE SALIDA | 40 ~ 120Kvp | 40 ~ 125Kvp |
| | pasos de 10 en 10Kv para K. Grueso y pasos de 2 en 2Kv para K. Fino | |
| CORRIENTE DEL TUBO | 50, 100mA - F. Fino 150, 200, 300mA - F.Grueso | 50, 100mA - F. Fino 150, 200, 300, 500mA - F.Grueso |
| TIEMPO DE EXPOSICIÓN | Timer microprocesado de 0,02 a 3,5 segundos en 25 pasos. | |
| REQUERIMIENTOS DE POTENCIA | 220 / 380V ~ 30KW | 220 / 380V ~ 40KW |

CARACTERÍSTICAS

Selección por sistema *soft touch* (teclado de membrana) del puesto de trabajo, encendido / apagado, con bucky / sin bucky, selección de tiempos, miliamperaje y orden de fluoroscopia, indicaciones de preparación, rayos y bloqueo.

Indicación en display de cristal líquido de la tensión de línea de alimentación, kilovoltaje de trabajo y tiempo de exposición.

Control electrónico continuo de dosis de fluoroscopia en modo manual y automático (opcional).

Disparador a distancia por control remoto «inalámbrico».

Generador de alta tensión en baja frecuencia para un puesto de trabajo, bobinado sobre núcleo acorazado de chapa de hierro silicio de grano orientado, monofásico rectificado en onda plena por rectificadores de estado sólido, todo el conjunto cerrado en baño de aceite dieléctrico.

Inge.ray S.R.L.

CAMPILLO 2585 (1427)

BUENOS AIRES - ARGENTINA

TE. (54 11) 45 23-39 99


(54 11) 45 23-57 92

TE./FAX (54 11) 45 23-57 92

www.ingeray.com.ar

e-mail: ventas@ingeray.com.ar

FRENTE

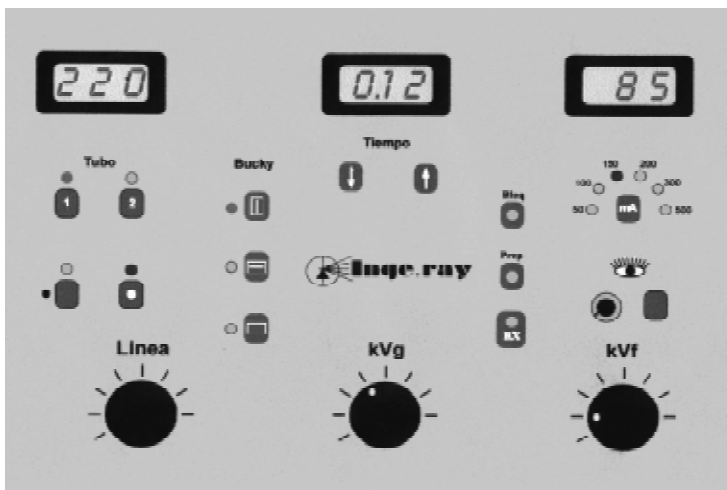

DISTRIBUIDOR